


ライトスティッカー

➤ ライトスティッカーとは

ライトスティッカーは滅菌済み単回使用のコードレスLEDライトです。

手元に影が落ちるなど視認性の確保が難しい手術の簡易補助光源としてお使いいただけます。

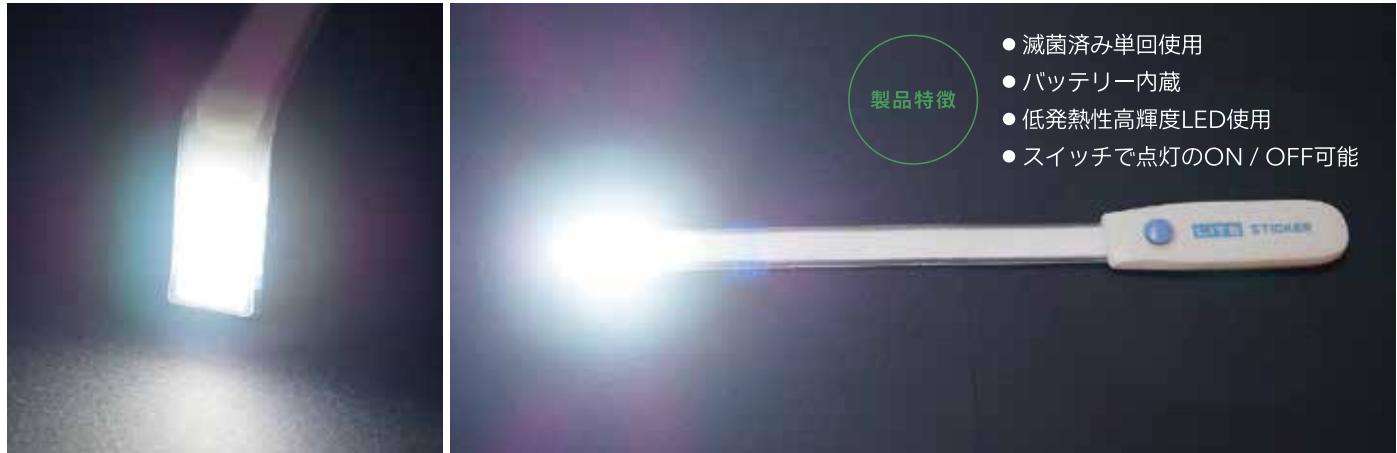

高い汎用性

- さまざまな手術の補助光源として使用可能
- 鋼製小物等へ貼付可能(光源付コードレス筋鉤として使用可能)
- 手術以外でも外来診察、処置等、様々な用途に使用されています。

➤ 特長

「無影灯の光が届かない」「想定よりも術野が暗い」「術野が深く暗い」

術野光量不足の課題に、解決策の提案です



リバース人工肩関節置換術にて
ライトスティッカーを使用した例
(整形外科)

※滅菌済み使い捨て光源ですので
必要な時にすぐご使用いただけます



センチネルリンパ節生検にて
ライトスティッカーを使用した例
(乳腺外科)

LS-2000-11

ライトスティッカー 100mm


LS-2000-10

ライトスティッカー 200mm



■スティック部は形状を維持します

照らしたい部位へのアプローチが容易となります。




■スティック部は薄型です

厚みは僅か約5mmであることから部位へのアプローチが容易となります。


 ■本体背面にテープが装着されています
 筋鉤等の鋼製小物等に貼り付ける事が可能
 です。

➤ 仕様

カタログ番号	LS-2000-10 200mm LS-2000-11 100mm
入 数	1本
サ イ ズ	ストラップ長:100mm、200mm (コンソール部分含まず)
電 源	LR44 1.5V×6個
ク ラ ス	一般医療機器 (クラス1)
届 出 番 号	13B3X10283L00002
そ の 他	連続使用時間: LS-2000スタンダードシリーズ:約40分 ※スイッチにて点灯のON・OFFが可能です。
注 意 事 項	本製品は滅菌済みにて提供されます。 本製品の仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。

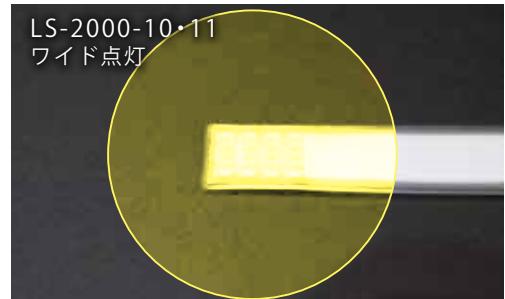
 ■スタンダードモデルワイド点灯
 LED部が向いている面を照らします。
 「より広く照らしたい」・「無影灯の補助光源として」等の使用例におすすめです。
